

Fillergyn™

Dispositivo Medico
per applicazione vaginale

FILLERGIN è un dispositivo medico contenente acido ialuronico ad alto peso molecolare, Tea Tree Oil ed MSM formulati in un gel delicato, studiato per un'ideale compatibilità con la mucosa vaginale.

L'involuzione del tratto genitale femminile è una caratteristica fisiologica della menopausa che spesso si associa ad atrofia vaginale con perdita di tono ed elasticità dei tessuti. Si verifica inoltre un cambiamento del pH vaginale che perde il suo carattere fisiologico di acidità favorendo possibili infezioni batteriche e micotiche.

Si assiste ad una sensibile riduzione dello strato di cellule epiteliali, perdita della turgidità dei tessuti che porta a secchezza vaginale associata a difficoltà e dolore nei rapporti sessuali ed alla comparsa di altri sintomi come irritazione, prurito, bruciore, odore sgradevole.

L'apporto di acido ialuronico esogeno, per le sue capacità di ripristinare il tono e l'elasticità dei tessuti nonché di migliorare ed accelerare il processo di ripielizzazione, rappresenta un approccio non farmacologico al trattamento dell'atrofia vaginale.

L'acido ialuronico è un polisaccaride costituito da glicosaminoglicani a catena non ramificata largamente presente nella matrice extracellulare dei tessuti in grado di legare grandi quantità di acqua contribuendo a mantenere turgido ed elastico l'epitelio.

La contemporanea presenza di Tea Tree Oil e di acido lattico che consente di riequilibrare il pH, creano le condizioni ambientali per contrastare la crescita dei microrganismi patogeni favorendo lo sviluppo della flora batterica residente. Il Tea Tree Oil ha inoltre proprietà deodoranti efficaci contro la formazione di sgradevoli odori. MSM è una sostanza naturale presente sia nei vegetali sia fisiologicamente nell'organismo umano dotata di potere antiossidante ed in grado di migliorare gli effetti dell'acido ialuronico.

FILLERGIN è un gel formulato utilizzando una matrice idrocellulosica e copolimera per favorire un'elevata ed uniforme bioadesione alla mucosa vulvo-vaginale realizzando un film protettivo ed elastico ad effetto barriera.

FILLERGIN grazie alla presenza di acido ialuronico agisce localmente svolgendo un'azione lubrificante e reidratante la mucosa vaginale che riduce il rischio di irritazioni, bruciore ed il formarsi di lesioni da sfregamento.

FILLERGIN in virtù della sua elevata maneggevolezza e tollerabilità può essere vantaggiosamente associato al trattamento convenzionale per la cura delle infezioni vaginali.

Composizione

Aqua, Sorbitol, Propylene Glycol, Glycerin, Hydroxyethylcellulose, Methylsulfonylmethane (MSM), Benzyl alcohol, Sodium Hyaluronate, PVM/MA Copolymer, Tea Tree Oil (Melaleuca alternifolia oil), Lactic acid, Phenoxyethanol, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Disodium EDTA.

Indicazioni


FILLERGIN favorisce i processi riparativi negli stati di atrofia della mucosa vulvo-vaginale durante la menopausa. Particolarmente nei casi in cui tali condizioni possano provocare sintomi quali irritazione, prurito, bruciore, secchezza vaginale, odore sgradevole, dolore durante l'attività sessuale.

FILLERGIN Migliora il tono e l'elasticità dei tessuti vaginali durante la menopausa.


Istruzioni per l'uso

Svitare il tappo, sfondare il sigillo di sicurezza con il retro-tappo.

1. Avvitare l'applicatore monouso sul collo del tubo stesso.

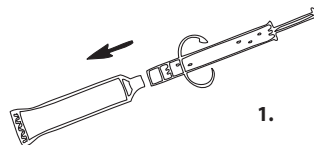


1.

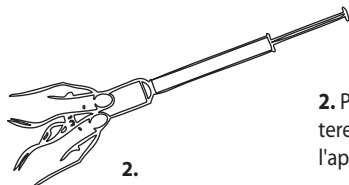


2.

2. Premere gentilmente il tubo alla sua estremità inferiore per permettere la fuoriuscita della quantità di gel sufficiente a riempire l'applicatore sino al fermo che consente di dosare 2,5 ml di prodotto.

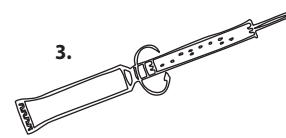

3.

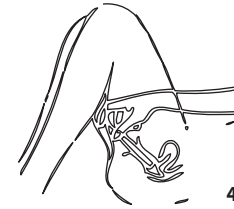

4.

3. Togliere l'applicatore e chiudere il tubo con il tappo.

4. Inserire delicatamente l'applicatore il più profondamente possibile in vagina. Per facilitare l'introduzione si consiglia di compiere l'operazione distese sulla schiena con le ginocchia sollevate. Spingere il pistone fino a svuotare completamente l'applicatore ed estrarre.

FILLERGIN si stenderà in modo uniforme sulle pareti vaginali aiutato dai movimenti fisiologici.

L'applicatore è monouso, pertanto, deve essere gettato dopo ogni somministrazione.

Frequenza d'uso

In presenza dei sintomi applicare **FILLERGIN** una volta al giorno, preferibilmente alla sera, per 2-4 settimane secondo il consiglio del medico. Per favorire il mantenimento di un buon equilibrio dell'ambiente vaginale: un'applicazione due volte la settimana. Non superare la frequenza d'uso indicata senza il consiglio del Medico.

Avvertenze

Non utilizzare il dispositivo medico dopo la data di scadenza riportata sulla confezione. Il dispositivo medico deve essere utilizzato entro tre mesi dalla prima apertura. Conservare il dispositivo medico a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non utilizzare il dispositivo se all'atto del primo impiego l'imballo esterno od il sigillo di sicurezza risultino danneggiati.

L'uso, specie se prolungato dei prodotti per uso topico, può dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso è necessario interrompere il trattamento ed istituire una terapia idonea, dopo avere consultato il medico.

Qualora i sintomi persistano consultare il medico. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Interazioni

Non sono note al momento interazioni tra **FILLERGIN** e medicinali normalmente utilizzati nella terapia pertinente con farmaci. Compatibile con i normali profilattici in lattice.

Controindicazioni ed effetti collaterali

Ipersensibilità individuale accertata verso i componenti presenti. Poiché non sono disponibili dati completi, il prodotto non è raccomandato in donne in età fertile se non nei casi di effettiva necessità e sotto diretto controllo del medico curante.

Confezioni

FILLERGIN: tubo contenente 25 ml di gel con 7 applicatori vaginali monouso **CE**

DISPOSITIVO MEDICO **CE**
0546

B.S.D. Bio Science Development
via A. Manzoni, 14 - 20067 Paullo - MI - Italy
mailbox@bsdpharma.it

Distributore esclusivo per l'Italia



via Firenze, 40 - 20060 Trezzano Rosa (MI) - Italy

info@sofarm.it **800-393346**

Legenda	LOT					
	Numero di lotto	Data di scadenza	ATTENZIONE: Leggere attentamente il foglio illustrativo	Fabbricante	Monouso	Non disperdere nell'ambiente